

RFO



Laminektomie  
Laminectomy



RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Bruderhofstrasse 10-12  
D-78532 Tuttlingen  
Telefon +49(0)7461/96170  
Telefax +49(0)7461/961720  
E-Mail: [info@rfq.de](mailto:info@rfq.de)  
Internet: <http://www.rfq.de>

Diese Broschüre bleibt ausschließlich Eigentum der Firma RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG. Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nicht gestattet. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

This brochure remains exclusive property of the company RFQMedizintechnik GmbH & Co. KG.


Reprinting, even partially, is not allowed.

Technical alterations and printing errors reserved.

**Demontage**



Zuerst den Griff schliessen ...  
First close the handle ...

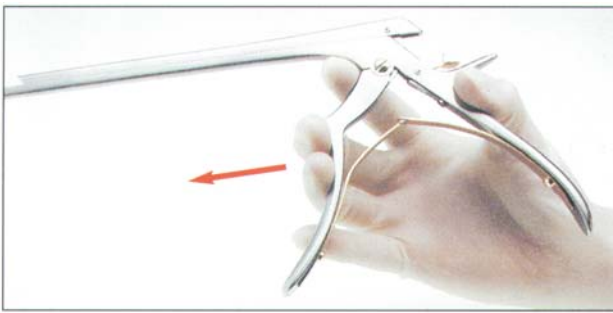

... nun den Griff wieder öffnen ...  
... now open the handle ...

**Zusammenfügen**



Zuerst Schaftteile ineinandersetzen ...  
First push shaft parts into one other ...




... nun den Riegel nach oben drücken ...  
... now push the lever upwards ...

**Disassembly**




... dann den Riegel nach unten drücken ...  
... then push the lever downwards ...

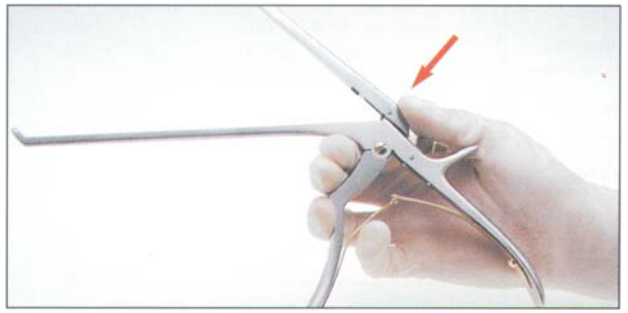


... und hinten auf den Schaft drücken.  
... and push downwards at the end of the shaft.

**Assembly**

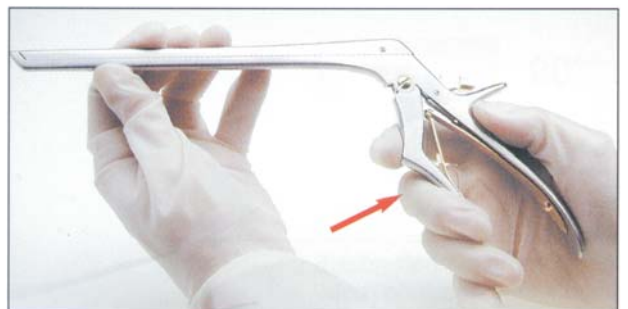

... dann den Griff schliessen ...  
... then close the handle ...

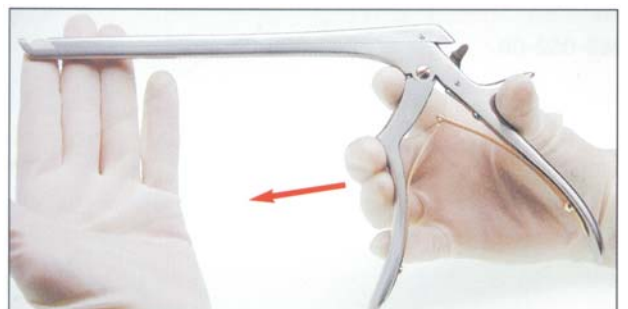

... und den Griff wieder öffnen.  
... and finally open the handle.

**Ferris-Smith Kerrison-Stanzen 90° aufwärts**  
**Ferris-Smith Kerrison-Punches 90° upwards**



Bissbreite - Width of bite

	1 MM	2 MM	3 MM	4 MM	5 MM	6 MM	
Schaftlänge - Length of shaft	150 MM	27-30501-15	27-30502-15	27-30503-15	27-30504-15	27-30505-15	27-30506-15
	180 MM	27-30501-18	27-30502-18	27-30503-18	27-30504-18	27-30505-18	27-30506-18
	200 MM	27-30501-20	27-30502-20	27-30503-20	27-30504-20	27-30505-20	27-30506-20
	230 MM	27-30501-23	27-30502-23	27-30503-23	27-30504-23	27-30505-23	27-30506-23

**Ferris-Smith Kerrison-Stanzen 90° abwärts**  
**Ferris-Smith Kerrison-Punches 90° downwards**



90°

Bissbreite - Width of bite

	1 MM	2 MM	3 MM	4 MM	5 MM	6 MM	
Schaftlänge - Length of shaft	150 MM	27-30511-15	27-30512-15	27-30513-15	27-30514-15	27-30515-15	27-30516-15
	180 MM	27-30511-18	27-30512-18	27-30513-18	27-30514-18	27-30515-18	27-30516-18
	200 MM	27-30511-20	27-30512-20	27-30513-20	27-30514-20	27-30515-20	27-30516-20
	230 MM	27-30511-23	27-30512-23	27-30513-23	27-30514-23	27-30515-23	27-30516-23

**Ferris-Smith Kerrison-Stanzen 40° aufwärts**  
**Ferris-Smith Kerrison-Punches 40° upwards**



Bissbreite - Width of bite

	1 MM	2 MM	3 MM	4 MM	5 MM	6 MM	
Schaftlänge - Length of shaft	150 MM	27-30521-15	27-30522-15	27-30523-15	27-30524-15	27-30525-15	27-30506-15
	180 MM	27-30521-18	27-30522-18	27-30523-18	27-30524-18	27-30525-18	27-30506-18
	200 MM	27-30521-20	27-30522-20	27-30523-20	27-30524-20	27-30525-20	27-30506-20
	230 MM	27-30521-23	27-30522-23	27-30523-23	27-30524-23	27-30525-23	27-30506-23



Chirurgische Instrumente  
Containersysteme  
Kaltlichtkabel  
Laryngoskope

und mehr ...

**RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG**  
Bruderhofstrasse 10-12 D-78532 Tuttlingen  
Telefon +49(0)7461/96170    Telefax +49(0)7461/961720  
www.rfq.de    info@rfq.de